

**BEBRIGHT**  
LIFE IS BEAUTIFUL

# ACTIVE BRUSH 取扱説明書

一般家庭用美容器

**保管用**  
**保証書付**

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も大切に保管してください。

## 安全上のご注意

定められた手順にしたがって無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しお買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートへお問合せください。故障状態のまま使用されますと身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

## ⚠ 危険



禁止

- 次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。  
医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。
- ◎ ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- ◎ 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- ◎ 心電計などの装着型医用電子機器
- 差込口や充電端子にピンやごみを付着させない。感電やショートによる火災などの原因になります。

## 警告



禁止

- 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。  
事故や肌・身体トラブルの原因になります。
- ◎整形手術をした部位 ◎美容医療施術直後（施術後2週間程度）◎皮膚炎・過度の日焼けなど。皮膚に異常がある場合およびその部位 ◎にきび・傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位 ◎かゆみやほてりのある部位 ◎膨らんだほくろ・ウイルス性のイボ ◎のどぼとけ ◎鼻・耳・唇 ◎眼球・まぶた・目のまわり ◎口内や陰部・粘膜など ◎心臓・みぞおちの周辺部位 ◎生理中の腹部 ◎刺青（タトゥー）周辺 ◎当日、脱毛処理をした部位 ◎金属、シリコン等を埋め込んである部位
- 使用中は金属や他の電気製品に接触させない。  
けがや本体が故障する原因になります。
- 動作中にアタッチメントの間に指を入れない。  
けがをする原因になります。
- ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーなどで本体や付属品を乾燥しない。部位の変形・故障の原因になります。
- 次に該当する方は使用しない。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方や治療を受けている方は医師に相談してください。
- ◎アトピー性皮膚炎・脂漏性皮膚炎・湿疹など皮膚疾患がある方 ◎アレルギー体質で特に肌が敏感な方 ◎妊娠中・授乳中・生理中の方 ◎シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方 ◎急性疾患・伝染病疾患のある方 ◎悪性腫瘍のある方 ◎感染症疾患の方 ◎結核性疾患のある方 ◎内臓疾患のある方 ◎骨折や骨粗しょう症など、骨に異常のある方 ◎神経障害・皮膚知覚障害のある方 ◎自ら操作が行えない方、安静を必要とする方、四肢の不自由な方 ◎意思表示のできない方、麻痺および知覚障害の方

## 警告



禁止

●次に該当する方は使用しない、下記にあてはまらない場合でも、ご使用に不安がある方や治療を受けている方は医師に相談してください。

◎洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方 ◎出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方 ◎高血圧の方 ◎心臓疾患のある方、血栓のある方 ◎体調のすぐれない方 ◎骨折、整形などで使用部位に埋め込み手術を受けた方 ◎目や顔に疾患がある方・治療歴のある方 ◎飲酒後や疲労の激しい場合 ◎薬（抗凝固剤等、血液が固まるにくくなる成分を含んだ薬）を服用中の方◎医師からマッサージを禁じられている方 ◎医師の治療を受けている方 ◎眠気をさそう薬を服用中の方 ◎発熱（38℃以上）している方 ◎乳幼児や成長過程の子供には使用しない。使用させない。ペットには使用しない。



使用者制限

●子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。また、子供の手の届かない場所に保管する。事故やけがをする原因になります。



落下禁止

●不安定な場所に置かない。また、本体や付属品を落としたり、ぶつけない。けがや本体が故障する原因になります。



浴室  
充電禁止

●浴室内での充電は絶対にしない。感電やショートによる火災などの原因になります。

## 警告



異臭異常  
発熱時  
使用禁止

- 本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用しない。破損・発火の原因になります。



発火注意

- 火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。火中投下・加熱・高温での充電・使用をしない。熱器具に近づけない。発熱・発火・破裂・動作不良の原因になります。（本製品は充電式電池を内臓しています。）



分解禁止

- 分解や修理・改造はしない。火災・感電・けがの原因になります。修理は弊社カスタマーサポートにご相談ください。
- 万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときは充電コードをすぐに抜く。けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。
- 本体および充電台の充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。感電やショートによる火災などの原因になります。
- 使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたらただちに使用を中止し、医師に相談する。
- 本製品は必ず定格適合の充電機器を使用する。



必ず守る

- 歯の治療を受けている人は、使用を控えるか部位をずらして使用する。歯の治療中は、頬やあごに刺激を強く感じたり不快に感じる場合があります。効果に影響はありませんが、強い違和感を感じる場合は医師にご相談ください。

## ⚠ 注意



禁止

- オイル、スクラブなど刺激の強いものは使用しない。肌トラブルや故障の原因になります。
  - 水やお風呂の中に浸水させてそのまま放置しない。本体が故障する原因になります。
  - 本体および付属品をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
  - 次に該当する人は使用しない。髪の毛がからみつき、髪を傷める原因になります。
- ◎植毛をされている人 ◎部分かつら（テープ貼り付け、エクステンションを含む編み込みなど）を装着中の人。
- LED光（赤／緑）を直接のぞき込まない。目を傷める原因になります。
  - EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。レベルは少しずつ調整してください。
  - 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。サウナなど高温多湿になる場所では使用しない。においや変色・故障の原因になります。万一、入浴剤入りのお湯などに浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流してください。
  - ブラシ部分は軽く当てるようにし、強く押し付けたり、早く動かしたりしない。けがや本体が故障する原因になります。

## ⚠ 注意



必ず守る

- 過度に 1 か所に集中して使用しない。肌を傷める原因になります。
- 肌表面にピリピリとした傷みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。また、肌が十分に湿った状態になるように随時水などを補充する。そのまま使用すると、頭皮や肌を傷める原因になります。
- 1 部位 1 回 5 分～ 15 分程度、1 日合計 30 分以内を目安に使用する。過度な使用を避け、少しずつ位置をずらしながらケアしてください。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤、化粧水やジェルなどを使った場合は必ず本体を水洗いする。本体の変色、変質や、塗装がはがれるなどの原因になります。
- 初めて使用する前に必ずプレテストを行ってから使用する。使いはじめや慣れるまでは必ず EMS レベル 1 から使用する。事故やけがをする原因になります。身体に慣らしてからレベルを調整してください。
- アクセサリー類（ネックレス・イヤリング等）は外してから使用する。事故やけがの原因になります。
- 使用後は必ず本体の汚れ・水分をしっかりと拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置せず風通しの良い日陰で保管する。本体がぬれたままの状態で放置すると、充電端子が腐食する原因になります。

## 各部の名称とはたらき

点灯色  
LEDランプ


### EMSレベル表示（動作中）



低電量提示：使用中、レベルのランプが点滅する。

本体

電源ボタン

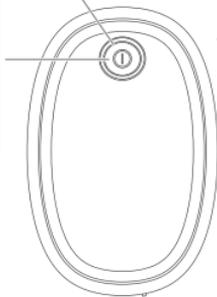


本体（裏）

赤LED/緑LED  
デフォルトは赤

ブラシ

黒色部分  
EMS通電部      充電端子

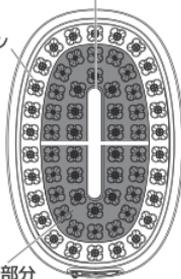

※本体は防水仕様になっています。入浴中でも使用することができますが、水やお風呂の中に浸水させたまま放置しないでください。


## セット内容

USBコード  
(TYPE-C)

取扱説明書



本体

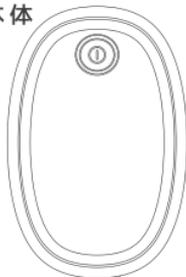

**注意**

※USBコードは防水ではありません。水はかからない場所で保管しぬれた状態での使用や、浴室内での充電は絶対にしないでください。

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

## ご使用前に（充電方法）

初めてご使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにして充電をしてからご使用ください。

### ●電池残量低下時



使用中、レベルのランプが点滅する。

### お願い

必ず本体の水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電してください。本体が湿った状態で充電すると障の原因になります。

### ●充電動作時間の目安\*

充電時間	動作時間
約2.5時間	約10時間


\*動作時間はEMSレベル3で使用した場合の目安であり、約10時間使用できます。（EMSレベル3・室温25℃の場合）充電時間や動作時間は、電池の残量や充電環境、使用環境によって大きく前後します。

※充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では、充電時間がのびたり、充電しない場合があります。

※初めての充電や、長期間ご使用にならなかった後に充電される場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か充電・使用を繰り返すと正常に戻ります。

- 1** USBコード、市販のACアダプターなどを利用し右図のように接続する。

※アダプターは付属していません。  
USB充電機器5V用をご利用ください

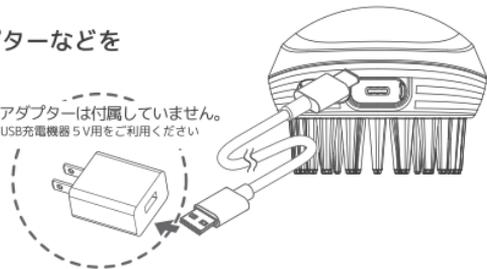

- 2** 市販のACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

※パソコン等のUSBポートからでも充電は可能ですが、一部のパソコンモバイルバッテリーでは充電できない場合があります。電源供給元を変更し、再度充電してください。急速充電器は故障の原因になるおそれがあるため、使用しないでください。

- 3** 本体と充電コードを接続する。

※充電前に本体と充電端子の水滴をしっかりと拭き取ってください。充電端子に水滴が残ったまま充電すると、製品の故障につながる恐れがあります。

※LEDが赤点灯し、充電を開始します。

- 4** 充電完了後、充電コードを抜く。

※充電中は、赤点灯（充電中の製品は使用できません）  
緑点灯になったら充電完了です。

充電中：赤点灯



充電完了：緑点灯



## 充電池について

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。（電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充電可能回数の目安は300～500回です。）
- 電池の交換には対応していません。
- 長時間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくとう充電ができなくなることがあります。

## はじめにお読みください

### ブラシ部分に関する注意点

E M S（電気刺激）を通電させるために、ブラシ部分にカーボン（炭）を配合しています。そのため、お肌や物にこすりつけると黒く汚れる場合がありますのでご注意ください。衣類の上からの使用を避け、素肌にご使用ください。なお、お肌の角質や皮脂汚れにカーボンの色が付き、黒っぽい粉のように残る場合があります。その際は水ですすいでください。

### E M Sについて

電気ので筋肉を刺激することができます。E M Sレベルは5段階から選択できます。使いはじめやお肌の弱い方、首すじに使用する場合は必ずE M Sレベル1（白ライト点灯）からご使用ください。

### E M Sに関する注意点

【E M Sは、水などの水分を通じて伝わる仕組みになっています。】

頭皮とお肌が乾燥しているとE M S刺激を感じにくくなります。E M S刺激を十分に実感するようにご使用部位を随時、水やお湯などで十分に湿らせるようにしてください。ブラシが地肌に触れるようにご使用いただくと比較的E M S刺激を感じやすくなります。E M S刺激の感じ方は個人差があります。なお、乾いた髪やお肌にもご使用いただけますが、E M S刺激は感じにくくなります。

### 緑LED

皮膚、頭皮をリフレッシュする $520\pm 10\text{nm}$ の波長を照射します。

### 赤LED

皮膚の奥深く（角質層）まで浸透する $630\pm 10\text{nm}$ の波長を照射します。



## お肌へのプレテスト

本製品を初めてご使用になる際は、肌トラブル防止のために必ずプレテストをしましょう。



- 1 肌を清潔な状態にする。  
※腕の内側を石鹸で洗います。
- 2 腕の内側を水で十分に濡らし、電源ボタンをオンにして約1分間使用する。


※EMSレベル1（白色点灯）でおこなってください。  
※少しずつ位置をずらしながら、軽く当てるようにしてください。

※実施中に発疹、かゆみ、痛みなどの異常が生じた場合は直ちにテストを中止してください。

- 3 黒色のブラシ部分の中央線をまたいで、両側を設置させる。  
片側だけが部位に設置していると通電しません。

- 4 24時間以内にお肌に異常（痛みやほてり）がないことを確認する。

※本製品を使用後、刺激により一時的に肌が赤くなることがございます。時間がたつと薄くなるので問題はございませんが、症状が回復しない場合は使用せずに専門医にご相談ください。

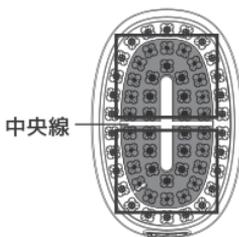

異常がみられる場合は使用しないでください。

## ご使用方法

使用推奨水温は5℃～42℃です。

- 1▶ 頭皮またはお肌を十分に濡らす。◎頭皮：水やシャンプーなど ◎お肌：水やお湯、化粧水、ゲルなど ※乾いた髪やお肌でも、頭皮ケアやリラクゼーションとしてお使いいただけますが、EMS刺激は感じにくくなります。EMS刺激を十分に実感するにはご使用部位を随時、水やお湯などで十分に湿らせるようにしてください。  
※オイル、スクラブなど刺激の強いものは使用しないでください。



- 2▶ 右図のように本体をしっかりと持つ。  
※手についたシャンプーや化粧水などをよく洗い流してから持ってください。本体が滑っておちるとけが故障の原因になります。

- 3▶ 電源ボタンを長押ししてオンにする。

電源ボタン2回単押し – 赤LED→緑LED→オフ→赤LED

電源ボタン1回単押し – EMSレベル1（白点灯）→レベル2（黄点灯）→レベル3（青点灯）  
→レベル4（緑点灯）→レベル5（赤点灯）→EMSレベル1（白点灯）

自動停止タイマー:動作開始から20分で自動停止します。

- 4▶ EMSレベルボタンを押して、EMSレベルを選択する。

※EMSレベルは5段階から選択が可能です。デフォルトはレベル1です。

※使いはじめやお肌の弱い方、首すじに使用する場合は必ずEMSレベル1（白色点灯）から使用してください。

※本製品は頭皮や顔、ボディに使用できますが、使用する部位によって電気刺激の感じ方が大きく異なります。使用部位をかえるごとに、必ずEMSレベル1から調整するようにしてください。

- 5▶ 赤、緑のLEDは刺激を感じませんがEMS同様、以下を参考にケアを行います。

## 頭皮 ケア

頭皮はEMSを感じにくい部位ですが、地肌をしっかり湿らせてからシャンプーを泡立てて、ブラシが地肌に触れるようにご使用いただくと比較的EMS刺激を感じやすくなります。EMSの刺激の感じ方には個人差があります。



### STEP1

前頭部と側頭部をケアする。①生え際に約5秒間あてる。②生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくり移動させる。

※①、②を2回ずつ繰り返します。

※①のあてはじめに本体を小刻みに動かすと、ブラシが地肌により接触しやすくなります。

※軽くあてるようにし、絶対に強くあてないでください。



### STEP2

後頭部をケアする。

STEP1と同じ手順で同じ方法で生え際から頭頂部へ向かってケアする。



### STEP3

頭頂部と後頭部をケアする。

図の位置を頭頂部からえりあしに向かって順に約5秒ずつ押し当てて移動する。頭頂部は、EMSを感じにくい場合がございます。



6 頭皮に使用した場合は、シャンプーを洗い流し通常のお手入れ（トリートメントなど）をする。

※ブラシ部分はカーボン（炭）を配合しているため、お肌の角質や皮脂汚れにカーボン色が付き、黒っぽい粉のように残る場合があります。その際は、水ですすいでください。



本製品（本体）はリチウムイオン電池を内蔵しています。本製品を破棄される場合は、自治体の分別ルールに従って破棄してください。

## EMS使用部位



EMSを感じやすい部位は前頭部、側頭部、後頭部です。  
頭頂部はEMSを感じにくい場合がございます。

## お掃除の仕方

1 電源がオフになっていることを確認する。

2 本体についている髪の毛や汚れを水で洗い流す。

タオルなどの乾いた布で、本体の水分を拭き取り風通しの良い場所で乾燥させる。

※ご使用後に、本体カバー内に水が残る場合がありますが、本体内部は防水仕様（IPX7）になっており、浸水しているわけではありません。気になる場合は、本体を振って水を排出させるようにしてください。

※ブラシ部分はカーボン（炭）を配合しているため、ご使用後に少量のカーボンが水に溶け出して本体やブラシが黒っぽくなることがあります。汚れの気にならない布を使用するようにしてください。

※湿ったままの状態で充電したり、放置しないでください。においや変色・故障の原因になります。



## よくあるご質問

### 電源が入りません

- 電源ボタンを押しても反応がないときは、本体の電池残量が不足しています。『ご使用前に（充電方法）』にしたがって本体を充電してください。
- 電源を入れるには電源ボタンを長押し（約3秒）してください。

### 充電が開始されません

- 本体と充電コードが正しく差し込まれていますか？  
充電が開始されない場合は、一度コードをはずしてから再度お試しください。
- 本体の充電端子がぬれていませんか？  
充電端子の水分を拭き取り、乾燥させてから充電してください。また、本体充電口の充電端子は定期的に清掃してください。

### 途中で停止します

- 本体の電池残量が不足しています。『ご使用前に（充電方法）』にしたがって本体を充電してください。
- 自動停止タイマー:動作開始から20分で自動停止します。

### EMS刺激が弱い、感じられない。

- 電源ボタンを単押ししてEMSレベルを上げてください。
- ブラシがお肌にうまくあたっていません。ブラシ部分が当たるようにしてください。
- お肌が乾燥していませんか？  
水や化粧水などでお肌を十分に湿らせてください。

### EMS刺激が強い、痛い

- EMSレベルボタンでレベルを下げてください。
- お肌が乾燥していませんか？  
水や化粧水などでお肌を十分に湿らせてください。
- ※個人差や使用部位により、刺激が強く感じられる場合があります。無理のない範囲でレベルを調整してご使用ください。肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止し専門医にご相談ください。

### 使用後に内部に水が残る

→本体内に水が残る場合がありますが、本体内部は防水（IPX7）であり、浸水しているわけがありません。気になる場合は本体を振って水を排出するようにしてください。

### 頭皮以外にも使用できますか？

→ボディにもご使用可能です。お顔へのご使用はお控えください。

## 保管のしかた

- 使用後は必ず本体の水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電してください。本体が湿った状態で充電すると、故障の原因になります。
- ブラシ部分にカーボン（炭）を配合しているため、ご使用後に少量のカーボンが水に溶け出して本体やブラシが黒っぽくなる場合があります。保管場所にご注意ください。
- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてから保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず風邪通しのよい清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用していないときは、本体をフル充電してから保管します。また、1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

# 保証書

## 保証書

**品番：ATB-24D**

保証期間はご購入より1年間です。

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

保証期間 1 年間 お買い上げ年月日                      年                      月                      日

## 製品仕様

品名	ACTIVE BRUSH		
品番	ATB-24D		
本体外形寸法	L9.5×W6.3×H4.8cm		
本体重量	約88g		
材質	本体:ABS、シリコン、PC		
バッテリー	800mAh,3.7V		
定格電源	5V,0.5A		
使用環境	温度5℃~40℃	相対湿度	≤85RH%
セット内容	本体:1台、TYPE-C充電コード:1本、取扱説明書:1部		

---

# ビーブライトカスタマーサポート

---

営業時間 平日 9:30 ~ 17:30 祝日、夏季休暇、年末年始を除く

Mail: [service@bebright.jp](mailto:service@bebright.jp)



株式会社ビーブライト

〒509-7201 岐阜県恵那市大井町 2087-524

Designed in Japan. Made in China.